

# VICAIR<sup>®</sup>

# 02

relief by air

## PRVI KOMPLETNO PERIVI JASTUK ZA INVALIDSKA KOLICA



Periv u perilici rublja  
na 60°C!



SPREMAN ZA UPOTREBU



PERIV U  
PERILICI RUBLJA



100%  
PROZRAČAN



ZADRŽAVANJE  
OBLIKA



145  
STANDARDNIH  
VELIČINA

**100% NIZOZEMSKI PROIZVOD**  
PROIZVEDEN U EU

## VICAIROVA INOVATIVNA TEHNOLOGIJA

Zrak je najbolji medij za preraspodjelu pritiska. Vicair je zarobio zrak u SmartCells ćelije, kojih se stotine nalaze u svakom jastuku. Ćelije se pomiču svaka zasebno, postepeno prilagođavajući antidekubitalni jastuk obliku tijela. Rezultat je superiorna preraspodjela opterećenja, optimalno pozicioniranje te udobnost za vrijeme sjedenja.

Vicair tehnologija je razvijena u suradnji s Amsterdamskim Rehabilitacijskim Centrom(Reade) i nagrađena Grand Prix nagradom na 'Salonu inovacija' u Ženevi, Švicarska.



### SPREMAN ZA UPORABU

Vicair jastuk je spreman za upotrebu čim ga izvadite iz kutije



### 100% PERIV U PERILICI

Jastuk sa svojim SmartCells ćelijama i presvlakom zajedno periv je u perilici rublja na 60°C



### 100% PROZRAČAN

Rupičasta vanjska struktura jastuka, osigurava optimalnu regulaciju temperature i kontrolu vlažnosti



### IDEALAN OBLIK

Novi jastuk zadržava svoj oblik osiguravajući korisniku maksimalnu zaštitu kože



### ŠIROK RASPON VELIČINA

Dostupan u dvije visine; 145 standardnih dimenzija te mogućnosti individualnih dimenzija na zahtjev

DOŽIVOTNO JAMSTVO NA NOVU  
GENERACIJU VICAIR SMARTCELLS

LIFETIME  
WARRANTY

**VICAIR®****ADJUSTER O2**

## OPTIMALAN JASTUK ZA KORISNIKE S ASIMETRIJOM TIJELA

Minimalizira klizanje i strižne sile ili trenje

Individualno rješenje za asimetriju tijela, čak i kod ekstremnijih slučajeva

Optimalno prilagođavanje obliku tijela za podjednaku raspodjelu pritiska



**Slijedi oblik tijela za podjednaku raspodjelu pritiska | podupire vrhove sjednih kostiju zdjelice i trtice | rješava položaj kose zdjelice**



**Potpora bedara može se individualno prilagoditi**

**Posebno oblikovan dio ispred sjednih kostiju zdjelice ograničava klizanje naprijed | pretvara strižne sile u normalne sile**

Tražite li optimalan jastuk za invalidska kolica za osobe s asimetrijom tijela ili amputacijom? Onda je Adjuster O2 rješenje za vas. Jastuk se prilagođava malim nagibima (asimetrijama) automatski. U slučaju jače asimetrije, lako se može individualno prilagoditi. Prilikom posjedanja na jastuk, pritisak će biti ravnomjerno raspoređen i klizanje prema naprijed ograničeno. Vicair Adjuster O2 je uvijek siguran izbor kada tražite visoku razinu udobnosti, sigurnost i odgovarajuću zaštitu kože. [vicair.com/adjuster-o2](http://vicair.com/adjuster-o2)

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Visina                      | 6 i 10 cm |
| Prosječna težina            | 725 Grama |
| Maksimalna težina korisnika | 250 kg    |



**VICAIR®**

## VECTOR 02

Vicair Vector 02 jastuk nudi poboljšanu stabilnost korisnika invalidskih kolica. To rezultira poboljšanom funkcionalnošću gornjeg dijela tijela i proširuje doseg korisnika. Jedinstveni raspored jastučića smanjuje pritisak u osjetljivom području oko sjedećih kostiju i repne kosti. Vector 02 pruža izvrsnu potporu za noge, optimalnu zaštitu kože i dodatnu stabilnost zdjelice.  
[vicair.com/vector-02](http://vicair.com/vector-02)

### NAJSTABILNIJI JASTUK ZA KORISNIKE INVALIDSKIH KOLICA

Proširivanje dohvata korisnika

Devet podesivih odjeljaka za optimalnu stabilnost

Dodatno pozicioniranje bedara

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Visina                      | 6 i 10 cm |
| Prosječna težina            | 725 Grama |
| Maksimalna težina korisnika | 250 kg    |



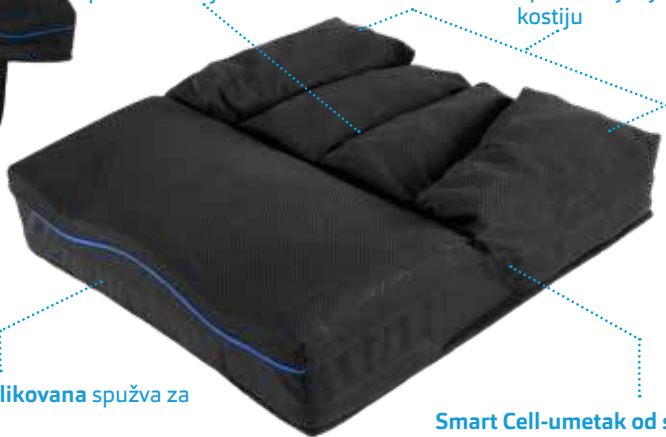
Potpora bedara – veće gustoće za postizanje veće bočne stabilnosti | dodatno raspodjela pritiska

Prednji odjeljci osiguravaju pozicioniranje nogu i stabilnost | jednostavno podešavanje za individualne potrebe pozicioniranja

**Prednost za sjedne kosti – dva odjeljaka**  
Za površinsku raspodjelu pritiska u zonama vrhova sjednih kostiju i trtične kosti te za dodatne prednosti pozicioniranja

**VICAIR®****ACTIVE O2****ZA AKTIVNE KORISNIKE  
INVALIDSKIH KOLICA**Savršen za korisnike koji često  
rade transfer

Izvrсна bočna i frontalna stabilnost

Ima elegantnu torbicu za  
pohranu kako bi ste osobne  
predmete imali na dohvat  
ruke**Prednost za sjedne kosti – dva odjeljka**  
Za površinsku raspodjelu pritiska  
u zonama vrhova sjednih kostiju i  
trtične kosti te za dodatne prednosti  
pozicioniranjaPotpora bedara veće  
gustoće za postizanje  
bočne stabilnosti |  
raspodjela pritiska za  
postizanje optimalnog  
opterećenja sjednih  
kostiju**Ergonomski oblikovana** spužva za  
lakši transfer**Smart Cell-umetak od spužve**  
ograničava klizanje prema  
naprijed

Vicair Active O2 je idealan jastuk za korisnike koji često rade transfere iz kolica . Prednji dio izrađen od spužve olakšava transfer. U isto vrijeme stražnji odjeljci , ispunjeni s SmartCells ćelijama , pružaju optimalnu zaštitu kože i udobnost. Active O2 ima lako dostupan đep za osobne stvari , npr. mobilni . Ukratko: sve što vam omogućava lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

[vicair.com/active-o2](http://vicair.com/active-o2)**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Visina                      | 6 i 9 cm   |
| Prosječna težina            | 1250 Grama |
| Maksimalna težina korisnika | 200 kg     |

**“Konačno mogu sjediti bez bolova  
i raditi transfere bez ograničenja”-**

Linda, korisnik Vicair Active O2

**VICAIR®****ALLROUNDER O2**

## ISTRAŽITE SVOJE MOGUĆNOSTI

Iako ste aktivni, ne zahtijevaju sve vaše aktivnosti uporabu kolica. Vicair AllRounder O2 je idealan za uporabu tijekom bavljenja sportom, kada sjedite na normalnom stolcu ili kada sjedite na podu. Uporabom podesivih traka, s kopčom za brzo kopčanje, AllRounder O2 je jednostavno pričvrstiti. Ovaj "aktivni" jastuk Vas slijedi gdje god idete i osigurava maksimalnu udobnost i zaštitu. Istražite svoju slobodu i svoje mogućnosti!

[vicair.com/allrounder-o2](http://vicair.com/allrounder-o2)



### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Prosječna težina 800 Grami  
Maksimalna težina korisnika 100 kg

**VICAIR®**

Bruynvisweg 5  
1531 AX Wormer  
The Netherlands  
T + 31 (0)75 642 99 99  
[info@vicair.com](mailto:info@vicair.com)  
[vicair.com](http://vicair.com)

Pratite nas na



Kontakt distributera:

**Orto Rea**  
Ulica Braće Radić 52/b  
42000 Jalkovec  
tel. +385 42 350 744  
mob. +385 95 350 7451  
[info@ortorea.hr](mailto:info@ortorea.hr)  
[ortorea.hr](http://ortorea.hr)