
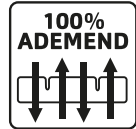


DRUKREDUCTIE EN STABILITEIT MET EEN WEGNEEMBARE POMMEL

Volgt de lichaamscontouren voor gelijkmatige drukverdeling | ondersteunt zitbeenknobbels & staartbeen | reguleert asymmetrische bekkenstand

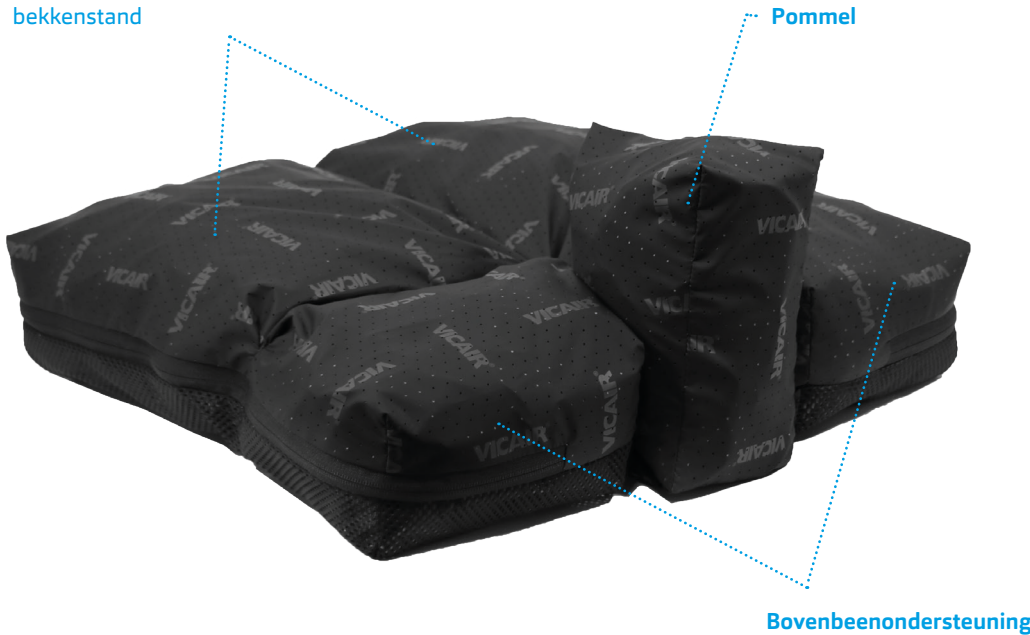

- ▲ **Ideaal voor situaties waar er sprake is van adductie**
- ▲ **Wegneembare pommel (abductieklos)**
- ▲ **Kussen en pommel hebben een aparte hoes voor gebruiksgemak**


De Vicair Pommel cushion 02 bestaat uit 5 individuele compartimenten inclusief een wegneembare pommel (abductieklos). Dit kussen is ideaal voor mensen die te maken hebben met adductie, bijvoorbeeld als de knieën of bovenbenen naar elkaar toe worden geduwd. De wegneembare pommel zorgt ervoor dat de knieën en/of bovenbenen uit elkaar worden gehouden, waardoor druk die met deze omstandigheden tot pijn kan lijden wordt verminderd. De pommel is volledig gevuld met SmartCells wat zorgt voor superieure drukverdeling en een zachte vulling tussen de knieën/benen. Het risico op pijn en drukwonden op deze plek wordt daardoor verminderd. De pommel kan weggenomen worden om transfers makkelijk te maken en om katheteriseren mogelijk te maken terwijl de gebruiker in de rolstoel zit.

BESCHIKBARE HOEZEN
Comfair Cover en Incotec Cover.

PRODUCT PERFORMANCE	
Huidbescherming / Antidecubitus	
Herverdeling van druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲▲
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲
Positioneren	
Laterale stabiliteit	▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲△
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲▲
Uithoudingsvermogen verhogen	▲▲▲▲△
Onderhoud & Veiligheid	
Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲△
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲△△
Makkelijk in onderhoud	▲▲▲▲△
Hygiëne	▲▲▲▲▲
Functionaliteit & Toepassing	
Comfort	▲▲▲▲▲
Ultra lichtgewicht	▲▲▲▲▲
Gemakkelijke transfers	▲▲▲△△
Beschikbare maten	▲▲▲▲▲
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Dikte	10 cm
Gemiddeld gewicht	850 gram
Max. gebruikersgewicht	250 kg
Machinewasbaar	60°C max.

KUSSEN MATEN	
■ Standaard	
■ Op aanvraag	

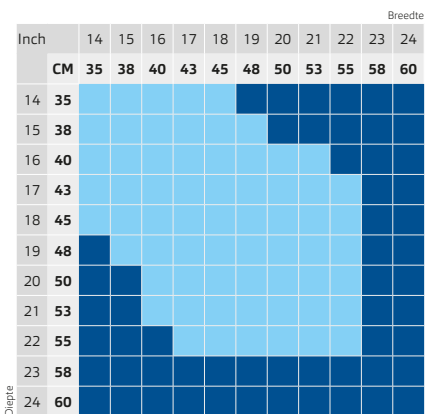

070069-OPC-NL-REV01/2023