
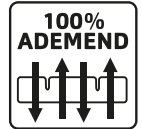


DRUKREDUCTIE EN STABILITEIT MET EEN WEGNEEMBARE ABDUCTIEKLOS

Volgt de lichaamscontouren voor gelijkmatige drukverdeling | ondersteunt zitbeenknobbels & staartbeen | reguleert asymmetrische bekkenstand

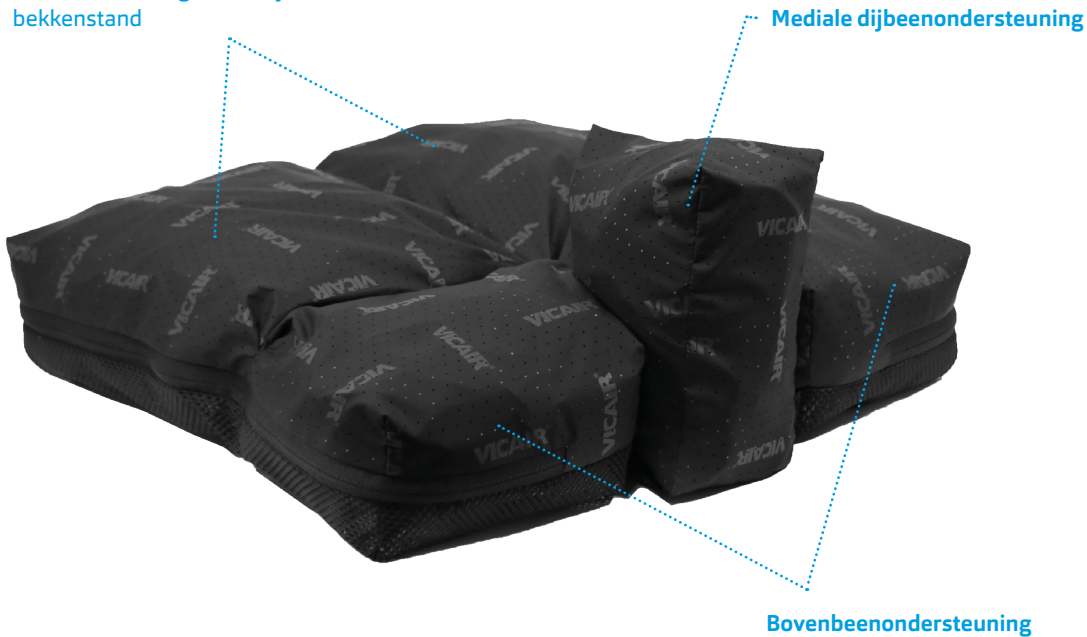

- ▲ **Ideaal voor situaties waar er sprake is van adductie**
- ▲ **Wegneembare abductieklos (mediale dijbeenondersteuning)**
- ▲ **Kussens en pommel hebben een aparte hoes voor gebruiksgemak**

De Vicair Pommel cushion 02 bestaat uit 5 individuele compartimenten inclusief een wegneembare abductieklos. Dit kussen is ideaal voor mensen die te maken hebben met adductie, bijvoorbeeld als de knieën of bovenbenen naar elkaar toe worden geduwd. De wegneembare abductieklos zorgt ervoor dat de knieën en/of bovenbenen uit elkaar worden gehouden, waardoor druk die met deze omstandigheden tot pijn kan leiden wordt verminderd. De abductieklos is volledig gevuld met SmartCells wat zorgt voor superieure drukverdeling en een zachte vulling tussen de knieën/benen. Het risico op pijn en drukwonden op deze plek wordt daardoor verminderd. De abductieklos kan weggenomen worden om transfers makkelijk te maken en om katheteriseren mogelijk te maken terwijl de gebruiker in de rolstoel zit.

BESCHIKBARE HOEZEN
Comfair Cover en Incotec Cover.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus

Herverdeling van druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲▲
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲

Positioneren

Laterale stabiliteit	▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲△
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲▲
Uithoudingsvermogen verhogen	▲▲▲▲△

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲△
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲△△
Makkelijk in onderhoud	▲▲▲▲△
Hygiëne	▲▲▲▲▲

Functionaliteit & Toepassing


Comfort	▲▲▲▲▲
Ultra lichtgewicht	▲▲▲▲▲
Gemakkelijke transfers	▲▲▲△△
Beschikbare maten	▲▲▲▲▲
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte	10 cm
Gemiddeld gewicht	850 gram
Max. gebruikersgewicht	250 kg
Machinewasbaar	60°C max.

KUSSEN MATEN

- Standaard
- Op aanvraag

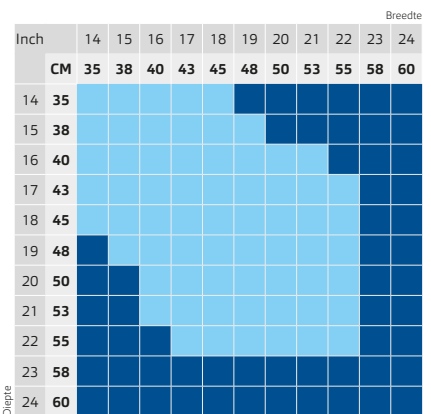

070069-OPC-NL-REV01/2024