

VOOR DE ACTIEVE ROLSTOELGEBRUIKER


Ondersteuning trochanters
voor laterale stabiliteit |
herverdeling van druk, om een
lagedrukzone te creëren

Lagedrukzone - Twee compartimenten
voor superieure ontlasting van
staartbeen, zitbeenknobbels en sacrum
& mogelijkheid voor positionering



SmartCell – Schuim grens
beperkt het onderuit schuiven

**Ergonomisch voorgevormd
schuim voor gemakkelijke
transfers**

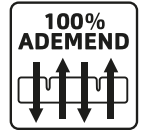

- ▲ Perfect voor gebruikers die zelfstandig transfers maken
- ▲ Uitstekende laterale en frontale stabiliteit
- ▲ Handig opbergvakje voor je persoonlijke spullen



De Vicair Active 02 is een voorgevormd kussen dat bestaat uit 4 individuele compartimenten gevuld met SmartCells aan de achterkant en een anatomisch voorgevormd schuimdeel aan de voorkant. Dit zorgt voor een unieke balans tussen het beschermen van de huid door herverdeling van druk rondom de zitbeenknobbels, staartbeen en sacrum, het stabiliseren het bekken en het makkelijker maken van transfers. Voor specifieke behoeften kan elk van de 4 met SmartCells gevulde compartimenten individueel worden aangepast. Dit maakt het mogelijk de dichtheid van de compartimenten te veranderen, wat ten goede komt aan gebruikers die: (1) een correctie of aanpassing voor een asymmetrisch bekken nodig hebben; (2) een (gedeeltelijke) ontlasting van het zitbeenknobbel-, staartbeen- en sacrale gebied wensen; (3) baat hebben bij extra laterale steun.

BESCHIKBARE HOEZEN

NVT. Vicair Active 02 heeft één hoes die zowel als binnen- en buitenhoes dient.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus

Herverdeling van druk	▲▲▲▲△
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲△
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲△
Schok- en trildemping	▲▲▲▲△

Positioneren

Laterale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲▲
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲△

Uithoudingsvermogen verhogen ▲▲▲▲▲

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲△△△

Makkelijk in onderhoud ▲▲▲▲△

Hygiëne ▲▲▲▲△

Functionaliteit & Toepassing

Comfort	▲▲▲▲▲
Ultra lichtgewicht	▲▲▲▲△
Gemakkelijke transfers	▲▲▲▲▲
Beschikbare maten	▲▲▲▲▲
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲△

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte	6 en 9 cm
Gemiddeld gewicht	1250 gram
Max. gebruikersgewicht	200 kg
Machinewasbaar	60°C (zonder schuim)

KUSSEN MATEN

- Standaard (Maat >53 cm altijd dikte 9cm)
- Op aanvraag

Inch	Breedte										
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35										
15	38										
16	40										
17	43										
18	45										
19	48										
20	50										
21	53										
22	55										
23	58										
24	60										

070069-OCT-NL-REV01/2025