

HET OPTIMALE KUSSEN VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS MET LICHAAMSASYMMETRIE


Volgt de lichaamscontouren voor gelijkmatige drukverdeling | ondersteunt zitbeenknobbels & staartbeen | reguleert asymmetrische bekkenstand

Pre-ischiale drempel beperkt het onderuit schuiven | schuifkrachten worden omgezet in normaalkrachten



Ritssluiting halverwege en rondom voor gemakkelijke aanpassing met de gebruiker op het kussen | kussen behoudt haar vorm, wat de gebruiker beter beschermt en het risico op doorzitten verkleint

Bovenbeenondersteuning

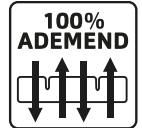

- ▲ **Individuele oplossing bij asymmetrie**
- ▲ **Minimaliseert onderuit schuiven en schuifkrachten**
- ▲ **Optimale aanpassing aan lichaamscontouren voor gelijke drukverdeling**

De Vicair Adjuster O2 bestaat uit 5 afzonderlijke compartimenten die ontworpen zijn om naar het lichaam te vormen bij druk. Het ontwerp van de compartimenten maakt het mogelijk specifieke delen van het bekken te beïnvloeden. Dit zorgt voor een unieke balans tussen het beschermen van de huid door herverdeling van druk rondom zitbeenknobbels, staartbeen, sacrum en trochanter, het positioneren van het bekken en ondersteunen van de dijbenen. Voor specifieke behoeften kan de vulling van elk compartiment gemakkelijk worden aangepast. Dit maakt het mogelijk de dichtheid van elk compartiment te veranderen, wat ten goede komt aan gebruikers die: (1) een milde tot ernstige bekkenscheefstand moeten accommoderen of een flexibele bekkenscheefstand moeten corrigeren; (2) extra ondersteuning aan de dijnen nodig hebben, bijvoorbeeld bij gebruikers met een amputatie boven de knie.

BESCHIKBARE HOEZEN

Vicair O2 Top Cover, Comfair Cover, Incotec Cover en Reversible Cover.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus

Herverdeling van druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲▲
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲▲
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲

Positioneren

Laterale stabiliteit	▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲▲
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲▲
Uithoudingsvermogen verhogen	▲▲▲▲△

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲△
Makkelijk in onderhoud	▲▲▲▲▲
Hygiëne	▲▲▲▲▲

Functionaliteit & Toepassing

Comfort	▲▲▲▲▲
Ultra lichtgewicht	▲▲▲▲▲
Gemakkelijke transfers	▲▲▲▲△
Beschikbare maten	▲▲▲▲▲
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲△

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte	6 en 10 cm
Gemiddeld gewicht	725 gram
Max. gebruikersgewicht	250 kg
Machinewasbaar	60°C max.

KUSSEN MATEN

■ Standaard (Maat >53 cm altijd dikte 10cm)
■ Op aanvraag

