


COMFORT EN HUIDBESCHERMING IN EEN KANTELROLSTOEL

Diepere compartimenten zorgen dat de pasvorm van het kussen effectief blijft in een kantelrolstoel, ook wanneer het kussen onder de rug door wordt geplatst | volgen de lichaamscontouren voor gelijkmatige drukverdeling | ondersteunen de zitbeenknobbels & staartbeen | reguleren een asymmetrische bekkenstand

Bekkendrempel stop-compartiment beperkt onderuit schuiven | Schuifkrachten worden omgezet in normaalkrachten



Bovenbeenondersteuning

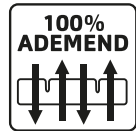

- ▲ **Ideaal voor gebruik in een kantelrolstoel met aanpasbare zitdiepte**
- ▲ **Vicair Adjuster O2 ontwerp met diepere achterkamers**
- ▲ **Optimale aanpassing aan lichaamscontouren voor gelijke drukverdeling**

De Vicair Multifunctional O2 bestaat uit 5 individuele compartimenten, die ontworpen zijn om naar het lichaam te vormen bij druk. Het kussen heeft een speciaal 8 cm dik ontwerp met langwerpige achterste compartimenten voor optimaal gebruik in kantel-rolstoelen. 8 cm dikte is dik genoeg om de huid te beschermen en laag genoeg voor optimale toegankelijkheid onder tafels, aanrechtbladen, bureaus enz. Het ontwerp van de compartimenten maakt het mogelijk specifieke delen van het bekken te beïnvloeden. Dit zorgt voor een unieke balans tussen het beschermen van de huid door herverdeling van druk rondom zitbeenknobbels, staartbeen en trochanters, het positioneren van het bekken en ondersteunen van de dijbenen. Voor specifieke behoeften kan de SmartCell vulling van elk compartiment individueel worden aangepast, wat het mogelijk maakt de dichtheid van elk compartiment te veranderen.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus

Herverdeling van druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲▲
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲▲
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲

Positioneren

Laterale stabiliteit	▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲▲
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲▲
Uithoudingsvermogen verhogen	▲▲▲▲△

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲△
Makkelijk in onderhoud	▲▲▲▲▲
Hygiëne	▲▲▲▲▲

Functionaliteit & Toepassing

Comfort	▲▲▲▲▲
Ultra lichtgewicht	▲▲▲▲▲
Gemakkelijke transfers	▲▲▲▲△
Beschikbare maten	▲▲▲△△
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲

BESCHIKBARE HOEZEN

Vicair O2 Top Cover, Comfair Cover en Incotec Cover.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte	8 cm
Gemiddeld gewicht	850 gram
Max. gebruikersgewicht	250 kg
Machinewasbaar	60°C max.

KUSSEN MATEN

cm	inches
37x52	14¾x20¾
40x52	16x20¾
45x52	18x20¾
50x52	20x20¾

Maten in breedte x diepte