


SPECIAAL ONTWERPEN VOOR PERSONEN MET OBESITAS

Volgt de lichaamscontouren voor gelijkmatige drukverdeling | ondersteunt zitbeenknobbels & staartbeen | reguleert asymmetrische bekkenstand

Pre-ischiale drempel beperkt het onderuit schuiven | schuifkrachten worden omgezet in normaalkrachten



Bovenbeenondersteuning

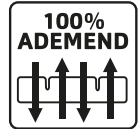

- ▲ Gebruikersgewicht tot 500 kg
- ▲ Met het ontwerp van de Vicair Adjuster 02
- ▲ Grotere maatvoering dan andere Vicair producten

De Vicair XXtra 02 bestaat uit 5 individuele compartimenten die ontworpen zijn om naar het lichaam te vormen bij druk en bevat speciaal ontworpen – grote – SmartCells om bariatrische mensen te kunnen ondersteunen. Elk compartiment beïnvloedt een specifiek deel van het bekken. Dit zorgt voor een unieke balans tussen het beschermen van de huid en onderliggend weefsel bij de zitbeenknobbels, staartbeen en de trochanters, het positioneren van het bekken en ondersteunen van de dijbenen. Het rolstoelkussen kan tot 500kg lichaamsgewicht dragen. Voor specifieke behoeften kan de SmartCell vulling van elk compartiment individueel worden aangepast, wat het mogelijk maakt de dichtheid van elk compartiment te veranderen.

PRODUCT PERFORMANCE

Huidbescherming / Antidecubitus

Herverdeling van druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲▲
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲▲
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲

Positioneren

Laterale stabiliteit	▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲▲
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲▲
Uithoudingsvermogen verhogen	▲▲▲▲△

Onderhoud & Veiligheid

Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲△
Makkelijk in onderhoud	▲▲▲▲▲
Hygiëne	▲▲▲▲▲

Functionaliteit & Toepassing


Comfort	▲▲▲▲▲
Ultra lichtgewicht	▲▲▲▲▲
Gemakkelijke transfers	▲▲▲▲△
Beschikbare maten	▲▲▲▲△
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dikte	10 cm
Gemiddeld gewicht	900 gram
Max. gebruikersgewicht	500 kg
Machinewasbaar	60°C max.

KUSSEN MATEN

- Standaard
- Op aanvraag

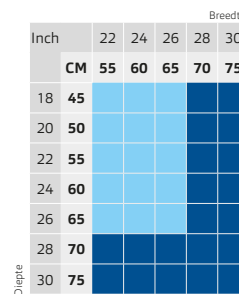

BESCHIKBARE HOEZEN

Vicair 02 Top Cover, Comfair Cover en Incotec Cover.